

## Accesso del paziente al Menu Info per esperti

Se si desidera chiedere telefonicamente ad es. la versione FW di un apparecchio o un contatore apparecchi diverso da N3 (che compaia direttamente all'avvio) è possibile spiegare al paziente l'accesso diretto al Menu Info per esperti. Con questo tipo di accesso si apre solo il Menu Info, per cui il paziente non può modificare in alcun modo la configurazione. È possibile utilizzare l'accesso diretto anche quando il paziente desidera visualizzare i risultati della sua terapia quali AHI e Perdite.

Condizione preliminare: l'apparecchio è in standby.

1. Premere il tasto Menu .

Si apre il Menu paziente.



Tenere premuto il tasto softSTART .

Si apre il Menu Info per esperti.

## Navigazione nei menu

Tasto funzione	Descrizione
	Sfogliare in avanti il menu
	Sfogliare indietro il menu
	Aumentare il valore / cambiare il periodo visualizzato
	Diminuire il valore / cambiare il periodo visualizzato
	Confermare il valore
	Rifiutare il valore
	Abbandonare il menu Tornare indietro alla schermata iniziale.

CE 0197

**Löwenstein Medical  
Technology GmbH + Co. KG**

Kronsaalsweg 40  
22525 Hamburg, Germany  
Tel.: +49 40 54702-0  
Fax: +49 40 54702-461  
www.loewensteinmedical.de

WM 68224 · 06/2016 IT



mbh10031it1605

Guida rapida per il personale medico specializzato

## prisma SMART prisma SOFT



- 1 Tasto 
- 2 Tasto 
- 3 Tasto On/Off 
- 4 Tasto Menu 
- 5 Tasto softSTART 





Questo documento non sostituisce le istruzioni d'uso. Nelle istruzioni d'uso troverete le informazioni complete.

**LÖWENSTEIN**  
medical

**LÖWENSTEIN**  
medical




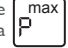


## Menu Impostazione per esperti

1. Tenere contemporaneamente premuti i tasti Menu  e softSTART .



Si apre il Menu per esperti.



Per richiamare il Menu per esperti: Premere  (tasto ).

Parametro	Descrizione
Modalità  <b>Mode</b>	CPAP / APAP
Modo CPAP: Pressione CPAP 	Consente di impostare la pressione CPAP.
Modo APAP: Pressione APAP minima  Pressione APAP massima 	Consente di impostare la pressione APAP minima.
	Consente di impostare la pressione APAP massima.
	È possibile commutare tra due diverse impostazioni della gestione APAP: <i>Std (standard):</i> Algoritmo APAP noto: le apnee e le ipopnee vengono trattate in modo più rapido e affidabile. L'apparecchio reagisce a russamento, Flattening e RERA. <i>dYn (dinamico):</i> Reazione più forte e rapida a eventi di tipo lievemente ostruttivo quali russamento e Flattening. La respirazione viene maggiormente normalizzata.
Livello softPAP 	L'agevolazione dell'espirazione softPAP è adatta a pazienti che avvertono come sgradevole l'espirazione contro una pressione elevata. Prima del passaggio all'espirazione l'apparecchio riduce temporaneamente la pressione della terapia ai livelli 1 (agevolazione dell'espirazione lieve) e 2 (agevolazione dell'espirazione normale). Per disattivare questa funzione, impostare softPAP su  .





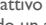

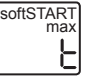



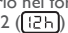
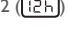
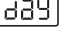



## Menu Info per esperti

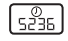





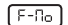
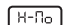

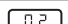
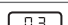

1. Tenere contemporaneamente premuti i tasti Menu  e softSTART .



Si apre il Menu per esperti.


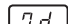


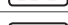


Per accedere al Menu Info: Premere  (tasto ).

Parametro	Descrizione
Blocco softPAP 	Qui è possibile impostare se il paziente può regolare autonomamente softPAP  o se la funzione è bloccata per il paziente  .
autoSTART 	Se autoSTART è attivo (  ) l'apparecchio si avvia compiendo un atto respiratorio (> 0,5 hPa) nella maschera, per poi spegnersi automaticamente dopo 5 secondi senza maschera. Per disattivare questa funzione impostare autoSTART su  .
Tempo di softSTART 	Consente di impostare l'intervallo di tempo durante il quale la pressione di ventilazione nell'ambito di softSTART aumenta fino alla pressione della terapia.
Pressione di softSTART 	Consente di impostare la pressione di softSTART.
Ora 	Consente di impostare l'ora.
Formato della visualizzazione temporale 	Consente di impostare se visualizzare l'orario nel formato 0 - 24 (  ) o 0 - 12 (  .
Data 	Consente di impostare il giorno del mese.
Data 	Consente di impostare il mese.
Data 	Consente di impostare l'anno.
Elimina i dati 	Consente di eliminare i contatori N1, N2, N3 e tutti i valori statistici dell'apparecchio. La configurazione impostata per il paziente non viene eliminata.

Parametro	Descrizione
	Ore di utilizzo (N3)
	Il tempo indicato corrisponde al tempo medio della terapia (senza artefatti e con maschera aperta) al giorno nel periodo indicato*
	AHI totale medio nel periodo selezionato*
	Perdite medie nel periodo selezionato*
	90% percentile di pressione nel periodo selezionato*
	Respiro di Cheyne Stokes*
	Versione firmware
	Versione hardware
	Ore della terapia senza artefatti e con maschera aperta
	Ore della terapia con umidificatore (senza artefatti e con maschera aperta)
	Ore di utilizzo incl. artefatti e maschera aperta
	Durata della ventola

\* Con questi parametri è possibile visualizzare altri periodi con il tasto  e il tasto .

	Ultimo giorno
	Ultimi 7 giorni
	Ultimi 28 giorni
	Ultimi 182 giorni
	Ultimi 365 giorni

I dati vengono visualizzati solo se sono effettivamente presenti sull'apparecchio. Un giorno di terapia inizia e finisce a mezzogiorno, ossia alle ore 12. I dati registrati da mezzanotte fino alle ore 12 vengono assegnati al precedente giorno di calendario.