

SCHEDA TECNICA

MASCHERA FACCIALE FORMA™ MULTIMISURA RIUTILIZZABILE PER CPAP E BI-LEVEL COMPLETA DI FASCE NUCALI

CODICI:	400471U	(M-L) - misure Medium e Large
	400470U	(S) - misura Small
	400474U	(M) - misura Medium
	400472U	(L) - misura Large
	400473U	(XL) - misura Extra Large

REV 14-05-2012 - annulla e sostituisce tutte le versioni precedenti _____ Pag 1 di 4 ____

Nome Commerciale: Maschera facciale FORMA™ multimisura riutilizzabile ventilata per CPAP e Bi-Level completa di fasce nucleari

Codici: 400471U / 400470U / 400474U / 400472 / 400473U

Marcatura: CE

Classe CE: IIa

Riferimenti Normativi: 93/42/EEC

Confezionamento: Singolo

Codice CND: R03010199

Codici RDM: 136845/R (400471U) - 136827/R (400470U) - 267196/R (400474U) - 336078/R (400472U) - 136835/R (400473U)

LATEX FREE

Prodotto da: Fisher & Paykel HealthCare Ltd.

Stabilimenti: Auckland - New Zealand

Distribuito da: Fisher&Paykel HealthCare S.A.S.

Immagine:



Maschera Facciale FORMA™

codici:	400471U	(M-L) misure Medium e Large
	400470U	(S) misura Small
	400474U	(M) misura Medium
	400472U	(L) misura Large
	400473U	(XL) misura Extra Large

**MASCHERA FACCIALE FORMA™ MULTIMISURA RIUTILIZZABILE
PER CPAP E BI-LEVEL COMPLETA DI FASCE NUCALI**

CODICI:	400471U	(M-L) - misure Medium e Large
	400470U	(S) - misura Small
	400474U	(M) - misura Medium
	400472U	(L) - misura Large
	400473U	(XL) - misura Extra Large

REV 14-05-2012 - annulla e sostituisce tutte le versioni precedenti _____ Pag 2 di 4 __

Descrizione:

La nuova maschera Facciale FORMA™ garantisce aderenza e comfort ottimali grazie ad una più ampia possibilità di movimento dovuta alla conformazione attiva del nuovo cuscinetto FlexiFoam™. Il nuovo pezzo a T aggiunge stabilità alla struttura della maschera interagendo con il cuscinetto in silicone perfettamente conformato e col design sottostante. Grazie alla facilità di utilizzo e all'ottima conformazione del cuscinetto, la maschera facciale FORMA™ impone uno standard completamente nuovo.

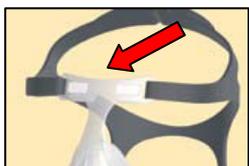
La maschera facciale FORMA™ viene fornita completa in una scatola, già montata e pronta per l'uso.

**Novità: Cuscinetto FlexiFoam™ a conformazione attiva**

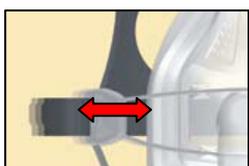
Il nuovo cuscinetto FlexiFoam™ garantisce un ottimo confort grazie alla particolare forma della parte interna, soffice, leggera e di sostegno. Il cuscinetto FlexiFoam™ a conformazione attiva si adatta naturalmente al viso del paziente

**Tecnologia FlexiFit™ (con cuscinetto interno in schiuma auto modellante)**

Il cuscinetto FlexiFoam™ utilizza la tecnologia FlexiFit™ per adattarsi automaticamente ad un'ampia gamma di profili nasali e facciali, si indossa con un semplice movimento e non richiede complicate regolazioni

**Novità: Struttura della maschera con pezzo a T**

Senza complicate regolazioni, il pezzo a T fornisce stabilità alla maschera e insieme alla forma sottostante permette alla tecnologia FlexiFit™ di autoregolarsi per adattare la maschera senza problemi

**Fascia scorrevole Glider con cordino a sgancio rapido**

La fascia scorrevole Glider con cordino a sgancio rapido garantisce un'ampia libertà di movimento e l'apertura della maschera con un solo movimento. La pressione della maschera resta costante quando la testa ruota da una parte all'altra, riducendo al minimo le perdite. Per togliere la maschera è sufficiente tirare il cordino a sgancio rapido.

**MASCHERA FACCIALE FORMA™ MULTIMISURA RIUTILIZZABILE
PER CPAP E BI-LEVEL COMPLETA DI FASCE NUCALI**

CODICI:	400471U	(M-L) - misure Medium e Large
	400470U	(S) - misura Small
	400474U	(M) - misura Medium
	400472U	(L) - misura Large
	400473U	(XL) - misura Extra Large

REV 14-05-2012 - annulla e sostituisce tutte le versioni precedenti _____ Pag 3 di 4 ____



Forma sottomento con fasce nucaali a corona

La forma sottomento garantisce maggiore stabilità alla maschera e mantiene l'aderenza anche con il movimento della bocca durante la notte.

Le fasce a corona interagiscono con la forma sottomento eliminando la necessità di una fascia sottomento addizionale



Novità: Diffusore d'aria innovativo

Silenzioso, non richiede manutenzione.

L'efficace sistema di diffusione dell'aria dirige il flusso d'aria lontano dal partner e minimizza il rumore del flusso in uscita che potrebbe disturbare il sonno.



Cuscinetto in silicone satinato

Cuscinetto con tecnologia di tenuta che assicura una sensazione di soffici ta e morbidezza sulla pelle per un posizionamento ottimale; la sua tessitura satinata migliora l'aderenza della maschera

La maschera   disponibile con adattatori in silicone esterni e cuscinetti in schiuma interni di diverse misure a seconda del codice:

Codice:	400471U	(M-L) la maschera viene fornita con due adattatori esterni e due cuscinetti interni di diversa misura (Medi e Grandi)
Codice:	400470U	(S) la maschera viene fornita con l'adattatore esterno ed il cuscinetto interno di misura Piccola
Codice:	400474U	(M) la maschera viene fornita con l'adattatore esterno ed il cuscinetto interno di misura Media
Codice:	400472U	(L) la maschera viene fornita con l'adattatore esterno ed il cuscinetto interno di misura Grande
Codice:	400473U	(XL) la maschera viene fornita con l'adattatore esterno ed il cuscinetto interno di misura Extra Large

Facile da indossare ed utilizzare, la maschera facciale FORMA™   la soluzione perfetta per dormire senza fatica   ridare energia alla vita del paziente.

**MASCHERA FACCIALE FORMA™ MULTIMISURA RIUTILIZZABILE
PER CPAP E BI-LEVEL COMPLETA DI FASCE NUCALI**

CODICI:	400471U	(M-L) - misure Medium e Large
	400470U	(S) - misura Small
	400474U	(M) - misura Medium
	400472U	(L) - misura Large
	400473U	(XL) - misura Extra Large

REV 14-05-2012 - annulla e sostituisce tutte le versioni precedenti _____ Pag 4 di 4

Contenuto della confezione:

- Maschera facciale FORMA™ completa fasce nicali già assemblate
- Semplice Guida per indossare la maschera

Materiali:

Scocca della maschera:	Policarbonato (PC)
Cuscinetti facciali esterni (varie misure):	Silicone
Cuscinetti in schiuma interni (varie misure):	Schiuma di Poliuretano
Valvola antisoffocamento:	Policarbonato (PC) / Silicone
Connettore a gomito:	Policarbonato (PC)
Appoggi frontali:	Silicone
Fascia a scorrimento Glider™	Nylon (PA)
Fasce nicali	Breathe-o-prene™ (Lycra™/Poliuretano)

Caratteristiche della maschera:

- Pressione operativa: 3 - 25 cmH₂O
- Spazio morto incluso connettore e tubo a gomito: 192 cc
- Flusso aria esalato con connettore ventilato (trasparente): vedi tabella riportata nelle istruzioni della maschera

Resistenza al flusso:

- Calo di pressione nella maschera a 50 l/min: 0,4 cm H₂O
- Calo di pressione nella maschera a 100 l/min: 1,4 cm H₂O

Le informazioni contenute in questa scheda tecnica sono fornite a titolo indicativo, e non sostituiscono i documenti di riferimento, in particolar modo il manuale d'uso e/o il manuale tecnico