

SCHEDA TECNICA

MASCHERA FACCIALE "FLEXIFIT" MULTIMISURA RIUTILIZZABILE PER CPAP E BI-LEVEL COMPLETA DI FASCE NUCALI

CODICI: [HC432U](#)
[HC432US](#) / [HC432UM](#) / [HC432UL](#) / [HC432UXL](#)


REV 22-06-2015 - annulla e sostituisce tutte le versioni precedenti _____ Pag 1 di 3 _____

Nome Commerciale: Maschera facciale "FLEXIFIT" multimisura riutilizzabile per CPAP e Bi-Level completa di fasce nicali
Codici: HC432U / HC432US / HC432UM / HC432UL / HC432UXL
Marcatura: CE
Classe CE: IIa
Riferimenti Normativi: 93/42/EEC
Confezionamento: Singolo
Codice CND: R03010102
Codici RDM: 28575/R (HC432U) - 28586/R (HC432US) - 28601/R (HC432UM) - 28611/R (HC432UL) - 28618/R (HC432UXL)

LATEX FREE

Prodotto da: Fisher & Paykel HealthCare Ltd.
Stabilimenti: Auckland - New Zealand
Distribuito da: Fisher&Paykel HealthCare S.A.S.

Immagine:

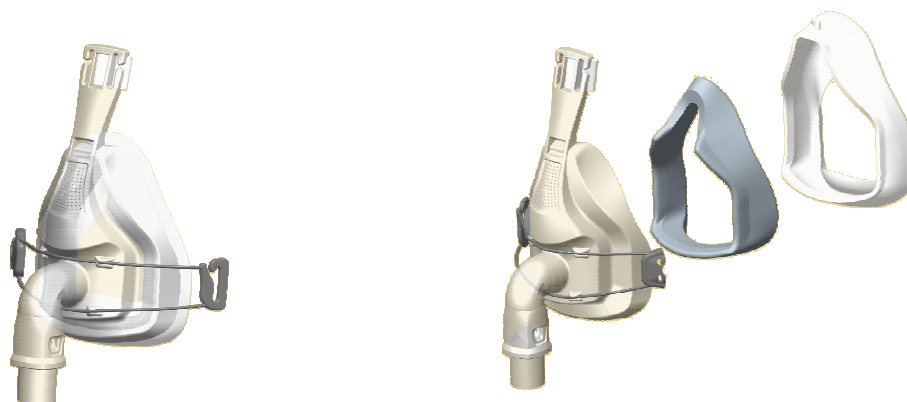

**MASCHERA FACCIALE "FLEXIFIT" MULTIMISURA RIUTILIZZABILE
PER CPAP E BI-LEVEL COMPLETA DI FASCE NUCALI**

CODICI: **HC432U**
HC432US / HC432UM / HC432UL / HC432UXL

REV 22-06-2015 - annulla e sostituisce tutte le versioni precedenti _____ Pag 2 di 3 ____

Descrizione:

Maschera facciale "FLEXIFIT" per CPAP e Bi-Level.

La maschera facciale "FLEXIFIT" HC432 ha una forma innovativa ed arriva fino sotto il mento; questo garantisce un miglior posizionamento della maschera stessa e conseguentemente una miglior tenuta e la riduzione di possibili perdite quando il paziente apre la bocca.

La maschera include un cuscinetto in spugna interno che lavora ed interagisce con la guarnizione in silicone satinato esterna in modo da garantire un posizionamento ed un comfort ottimate ed una tenuta ancora più efficace.



I cuscinetti in silicone esterni ed i cuscinetti in spugna interni sono disponibili in quattro diverse misure (piccola, media, grande e xl) e vengono forniti, a seconda del codice, come segue:

Codice	HC432U	la maschera viene fornita completa di tre adattatori esterni e tre cuscinetti interni di diversa misura (piccola, media e grande)
	HC432US	la maschera viene fornita con l'adattatore esterno ed il cuscinetto interno di misura piccola
	HC432UM	la maschera viene fornita con l'adattatore esterno ed il cuscinetto interno di misura media
	HC432UL	la maschera viene fornita con l'adattatore esterno ed il cuscinetto interno di misura grande
	HC432UXL	la maschera viene fornita con l'adattatore esterno ed il cuscinetto interno di misura xl

**MASCHERA FACCIALE "FLEXIFIT" MULTIMISURA RIUTILIZZABILE
PER CPAP E BI-LEVEL COMPLETA DI FASCE NUCALI**

CODICI: HC432U
HC432US / HC432UM / HC432UL / HC432UXL

REV 22-06-2015 - annulla e sostituisce tutte le versioni precedenti _____ Pag 3 di 3 ____

La maschera e le fasce nicali sono già assemblate in un'unica confezione, rendendo immediato e semplice l'utilizzo della maschera.

Le fasce in Breathoprene™ sono fresche, leggere e comode da indossare.

L'esclusivo meccanismo scorrevole fornito in dotazione (glider) permette al paziente di muoversi liberamente senza provocare lo spostamento della maschera, riducendo così le perdite e favorendo il posizionamento della stessa sul volto del paziente.

La maschera è dotata inoltre di un sistema di sgancio rapido che aumenta la sicurezza e permette di sganciare le fasce nicali mantenendo la regolazione iniziale.

Il tubo si connette alla maschera in modo facile e veloce e può ruotare di 360° in entrambe le direzioni facilitando il posizionamento della maschera stessa.

La maschera è inoltre dotata di una valvola di sicurezza unidirezionale che impedisce il "rebreathing" dell'aria espirata e garantisce la possibilità di respirare liberamente in caso di interruzione del flusso d'aria.

Materiali:

Scocca della maschera:	Policarbonato (PC)
Cuscinetti facciali esterni (varie misure):	Silicone
Cuscinetti in schiuma interni (varie misure):	Schiuma di Poliuretano
Valvola antisoffocamento:	Policarbonato (PC) / Silicone
Connettore a gomito:	Policarbonato (PC)
Appoggi frontali:	Silicone
Fascia a scorrimento Glider™	Nylon (PA)
Fasce nicali	Breathe-o-prene™ (Lycra™/Poliuretano)

Caratteristiche della maschera:

- Pressione operativa: 3 - 25 cmH₂O
- Spazio morto incluso connettore e tubo a gomito: 115 cc
- Flusso aria esalato con connettore ventilato (trasparente): vedi tabella riportata nelle istruzioni della maschera

Resistenza al flusso:

- Calo di pressione nella maschera a 50 l/min: 0,3 cm H₂O
- Calo di pressione nella maschera a 100 l/min: 1,3 cm H₂O

Le informazioni contenute in questa scheda tecnica sono fornite a titolo indicativo, e non sostituiscono i documenti di riferimento, in particolar modo il manuale d'uso e/o il manuale tecnico