

SHEDA TECNICA

**Maschera Nasale ZEST™ riutilizzabile ventilata
per CPAP e BiLevel completa di fasce nucali**

CODICI: 400440U ZEST™
400439U ZEST™ Petite
400441U ZEST™ Plus

REV 22-06-2015 - annulla e sostituisce tutte le versioni precedenti _____ Pag 1 di 4 ____

Nome Commerciale: Maschera nasale ZEST™ riutilizzabile ventilata per CPAP e BiLevel completa di fasce nucali disponibile in tre diverse misure

Codici: 400440U / 400439U / 400441U

Marcatura: CE

Classe CE: IIa

Riferimenti Normativi: 93/42/EEC

Confezionamento: Singolo

Codice CND: R03010102

Codici RDM: 136821/R (400440U) - 136838/R (400439U) - 267083/R (400439U)

LATEX FREE

Prodotto da: Fisher&Paykel HealthCare Ltd.

Stabilimenti: Auckland - New Zealand


Distribuito da: Fisher&Paykel HealthCare S.A.S.

Immagine:



Maschera Nasale ZEST™

CODICI: 400440U ZEST™
400439U ZEST™ Petite
400441U ZEST™ Plus

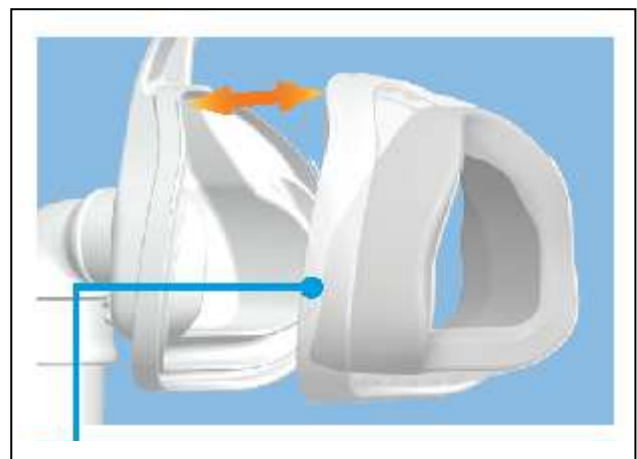

Nuovo cuscinetto in silicone Easy-Clip

Il cuscinetto in silicone Easy-Clip garantisce l'applicazione e la rimozione dello stesso con un solo movimento per una pulizia rapida e senza sforzo.

Il nuovo design facilita un allineamento perfetto fra la struttura della maschera ed il cuscinetto

**Maschera Nasale ZEST™ riutilizzabile ventilata
per CPAP e BiLevel completa di fasce nicali**

CODICI:	400440U	ZEST™
	400439U	ZEST™ Petite
	400441U	ZEST™ Plus

REV 22-06-2015 - annulla e sostituisce tutte le versioni precedenti _____ Pag 2 di 4 _____

Descrizione:

Piccola, silenziosa, facilissima da indossare ed utilizzare, la maschera nasale ZEST™ offre un comfort ottimale.

Il design innovativo della maschera nasale ZEST™ unisce il nuovo cuscinetto in silicone Easy-Clip e l'innovativo diffusore dell'aria alla tecnologia FlexiFit di comprovata efficacia.

La maschera nasale ZEST™ viene fornita completa in una scatola, già montata e pronta per l'uso.

**Cuscinetto in silicone Easy-Clip:**


Il nuovo cuscinetto Easy-Clip in silicone satinato garantisce l'applicazione e la rimozione dello stesso con un solo movimento per una pulizia rapida e senza sforzo. Il nuovo design facilita un allineamento perfetto tra la struttura della maschera ed il cuscinetto

**Tecnologia FlexiFit (con cuscinetto interno in schiuma auto modellante):**

Tale tecnologia permette alla maschera di modellarsi ed adattarsi automaticamente ad un'ampia gamma di profili del naso e del viso senza la necessità di complicate regolazioni.

**Diffusore d'aria innovativo e silenzioso:**

Il diffusore d'aria per la rimozione della CO₂ è integrato alla struttura della maschera, non richiede manutenzione, dirige il flusso d'aria lontano dal partner e minimizza il rumore del flusso in uscita

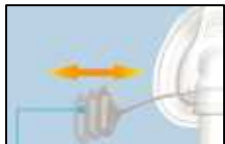**Sistema a scorrimento "Glider":**

La fascia a scorrimento Glider permette libertà di movimento garantendo l'aderenza del cuscinetto al viso del paziente. La tenuta della maschera resta costante anche quando si gira il capo da un lato all'altro, riducendo le perdite d'aria.

**Sganci per la rimozione delle fasce nicali:**

Gli sganci sul Glider e sulla struttura della maschera permettono la rimozione della cuffia nucale con un solo movimento e permettono di riassembleare la stessa senza doverla regolare ogni volta

Facile da indossare ed utilizzare, la maschera nasale ZEST™ è la soluzione perfetta per dormire senza fatica e ridare energia alla vita del paziente.

**Maschera Nasale ZEST™ riutilizzabile ventilata
per CPAP e BiLevel completa di fasce nucali**

CODICI: 400440U ZEST™
400439U ZEST™ Petite
400441U ZEST™ Plus

REV 22-06-2015 - annulla e sostituisce tutte le versioni precedenti _____ Pag 3 di 4 _____

La maschera nasale ZEST™ è disponibile in diverse misure e viene fornita, a seconda del codice, come segue:

Codice: 400440U Maschera nasale ZEST™




Codice: 400439U Maschera nasale ZEST™ Petite



Codice: 400441U Maschera nasale ZEST™ Plus



INDOSSABILITÀ DELL'INTERFACCIA
nella normale distribuzione della popolazione*

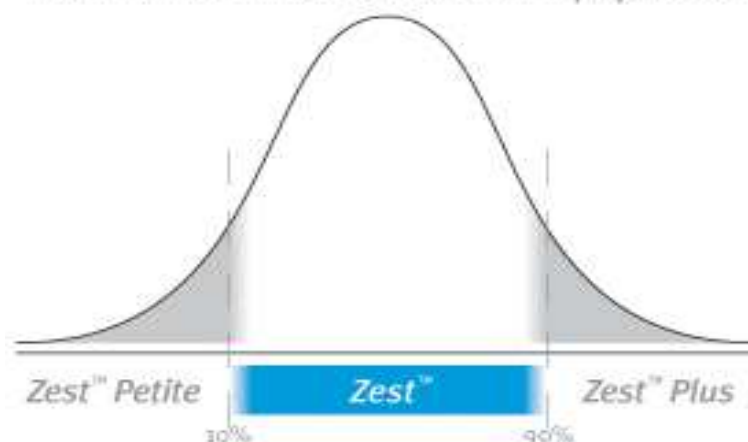

*Secondo il database antropometrico di Fisher & Paykel Healthcare.

**Maschera Nasale ZEST™ riutilizzabile ventilata
per CPAP e BiLevel completa di fasce nicali**

CODICI: 400440U ZEST™
400439U ZEST™ Petite
400441U ZEST™ Plus

REV 22-06-2015 - annulla e sostituisce tutte le versioni precedenti _____ Pag 4 di 4 _____

Contenuto della confezione:

- Maschera nasale ZEST™ completa di Fasce nicali
- Semplice Guida per indossare la maschera

Materiali:

Scocca della maschera:	Policarbonato (PC)
Cuscinetto nasale esterno:	Silicone - Policarbonato
Cuscinetto in schiuma interno:	Schiuma di Poliuretano
Connettore a gomito:	Policarbonato (PC)
Appoggi frontali:	Silicone
Fascia a scorrimento Glider™	Nylon (PA)
Fasce nicali	Breathe-o-prene™ (Lycra™/Poliuretano)

Caratteristiche della maschera:

- Pressione operativa: 3 - 25 cmH₂O
- Spazio morto incluso connettore e tubo a gomito:

ZEST™ Petite	40 cc
ZEST™	60 cc
ZEST™ Plus	90 cc
- Flusso aria esalato: vedi tabella riportata nelle istruzioni della maschera

Resistenza al flusso: Calo di pressione nella maschera a 50 l/min: 0,2 cm H₂O
Calo di pressione nella maschera a 100 l/min: 0,8 cm H₂O

Le informazioni contenute in questa scheda tecnica sono fornite a titolo indicativo, e non sostituiscono i documenti di riferimento, in particolar modo il manuale d'uso e/o il manuale tecnico