

**ResMed**

Changing lives  
with every breath

## AirSense™ 10 Elite

37265 AirSense™ 10 Elite

**Generatore di flusso a pressione positiva continua**

Classificazione CND: Z12030102 -

GENERATORE DI FLUSSO A PRESSIONE POSITIVA CONTINUA

**Progressivo di sistema attribuito al DM: 1253147/R**

Anno di immissione sul mercato: 2015

Produttore – ResMed

(1 Elisabeth MacArthur Drive, Bella Vista, NSW 2153, Australia)

Garanzia – 24 mesi dopo la data d'acquisto.



CE 0123

**Ventilatore a pressione positiva continua** per il trattamento di pazienti affetti da Apnee Ostruttive nel Sonno (OSAS).


**Dotato di tecnologia di trasmissione-ricezione dati in modalità wireless (senza fili) su rete GSM.**

Calcolo automatico di perdite intenzionali su fori di esalazione maschera con selezione dell'interfaccia dal menù di impostazioni.

Pressioni operative da 4 a 20 cmH<sub>2</sub>O

### Caratteristiche tecniche:

- **Modalità di funzionamento:** CPAP
- **Selezione delle interfacce:** Tipo di maschera
- **Tipologia di ventilazione:** Non Invasiva
- **Pressioni erogate:** da 4 a 20 cmH<sub>2</sub>O
- **Regolazione manuale tempo di rampa** per il raggiungimento della pressione terapeutica
- **Regolazione automatica tempo di rampa** con rilevamento dell'addormentamento del paziente
- **Compensazione automatica dell'altitudine**
- **Display LCD a colori per la visualizzazione diretta dei seguenti parametri:**
  - \* Impostazioni
  - \* Modalità in uso
  - \* Pressioni erogate
  - \* Perdite in Litri/Minuto
  - \* Indice di Apnea/Ipapnea
  - \* Indice di Apnea
  - \* Dati di efficacia e dati di utilizzo
  - \* SpO<sub>2</sub> e Frequenza Cardiaca (con modulo opzionale)
  - \* Menù Paziente (base e avanzato)
  - \* Opzioni
- **Programmazione di Promemoria per il Paziente** anche ad intervalli ripetuti, da 1 a 24 mesi (sostituzione maschera – sostituzione filtro – chiamata medico – inserimento scheda memoria – chiamata tecnico – promemoria personalizzabile).
- **Memoria interna di 365 sessioni** che possono essere visualizzati sul dispositivo, ResScan™ e in wireless mediante AirView™ e 30 sessioni di dati dettagliati ad alta risoluzione visualizzabili su computer attraverso il software dedicato ResScan™, con gestione cartella clinica del paziente, follow up, programmazione visite di controllo, ecc.

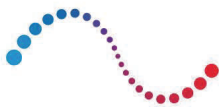

**ResMed**

*Changing lives  
with every breath*

- **Funzione Smart Start™** sospende/riprende la terapia quando viene rilevata la disconnessione/connesione della maschera dal viso del paziente
- **Sistema di umidificazione opzionale integrato e riscaldato HumidAir™** con Climate Control™ per la regolazione (automatica o manuale) della temperatura e del livello di umidificazione. Circuito paziente opzionale Climate LineAir™, riscaldato e dotato di sensori di temperatura per l'erogazione in automatico dell'85% di umidità relativa. Sistema di protezione anti-condensa, anche ad altissimi livelli di umidificazione.
- **Alimentazione elettrica** 110/220 Volt con possibilità (opzionale) di utilizzo con alimentazione a 12/24 Volt
- **Batteria esterna** opzionale ResMed PowerStation II™.
- **Apparecchiatura conforme** alle normative Internazionali IEC 601.1, classe II tipo CF, realizzato in conformità con la Direttiva Comunitaria 93/42/EEC (CE).
- **Livello di emissioni sonore** 27dBA, livello di pressione a 1 metro 13dBA
- **Dimensioni in millimetri:** Altezza 116 - Larghezza 255 - Profondità 150 (con HumidAir)
- **Condizioni ambientali:** temperatura di esercizio tra +5 e +40°C - Umidità di esercizio 15-95% non condensante - Temperatura di stoccaggio e trasporto tra -20 e +60° C - Umidità di stoccaggio e trasporto fino al 95% non condensante
- **Fornito di borsa per il trasporto** per apparecchiatura ed accessori.